

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА АВТОТЕСТ

Продукт: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Производител: Roche

Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie


BERLIN




Bulgarisch

Подготовка

За провеждане на теста трябва да са налични следните компоненти:

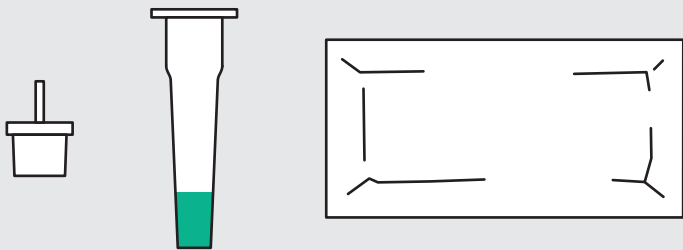

За вземане на проба използвайте предлаганите се отделно клечки-тампони (марка: Nasal Swabs, мат. № 09 421 777 001)

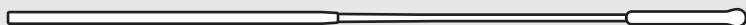

Вземане на проба (при стайна температура)


Вкарайте клечката-тампон в двете ноздри ок. 2 см, завъртете по я четири пъти и при това я прекарайте върху носната лигавица (ок. 15 секунди)



Behandlung der Probe

Вкарайте клечката-тампон и завъртете повече от десет пъти

При това притиснете тръбичката към тампона, за да освободите антигена

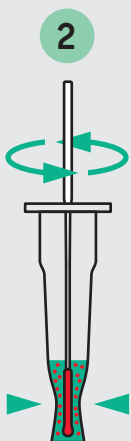


повече от 10 x

Извадете тампона със силен натиск върху стената на тръбичката и поставете капачката



Капнете четири капки във вдлъбнатината за проба в тестовата касета

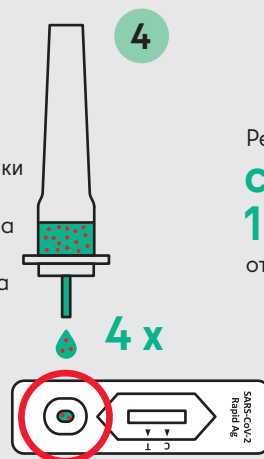

Резултат след 15 min отчитане



След повече от 30 минути не отчитайте резултат!


Оценка на резултатите

Всеки цветен оттенък при тестовата линия (T) се разглежда като положителен




Отрицателен

Цветна контролна линия (C)

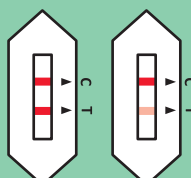

Положителен

Цветна контролна (C) и тестова линия (T)

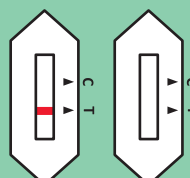

Невалиден/неясен

Няма контролна линия (C)

Учениците/ученичките, както и персонала в училището или градината могат да отидат в училището/градината

- Родителите съобщават в училището, че детето е болно, респ. персоналят на училището или градината съобщава, че е болен
- Учениците/ученичките, както и персоналят на училището или градината отиват за допълнителен PCR тест в централен тестов център

Повторете теста с нов материал

Изхвърляне



Изхвърляйте използваните тестови комплекти изолирано в домашните отпадъци