


# KRÓTKA INSTRUKCJA WYKONANIA SAMODZIELNEGO TESTU



Produkt: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test  
Producent: Roche

## Przygotowanie

Do przeprowadzenia testu wymagane są następujące elementy:

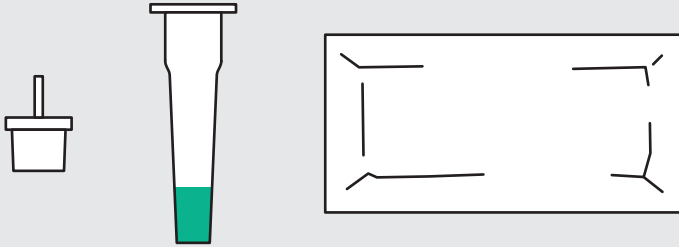


Do pobrania próbki użyć oddzielnie dostępnej wymazówki (marka: Nasal Swabs, nr mat. 09 421 777 001)



## Pobieranie próbki (w temperaturze pokojowej)

Wprowadzić wymazówkę do obu nozdrzy na głębokość ok. 2 cm, obrócić cztery razy przeciągając ją po błonie śluzowej nosa (ok. 15 sekund)

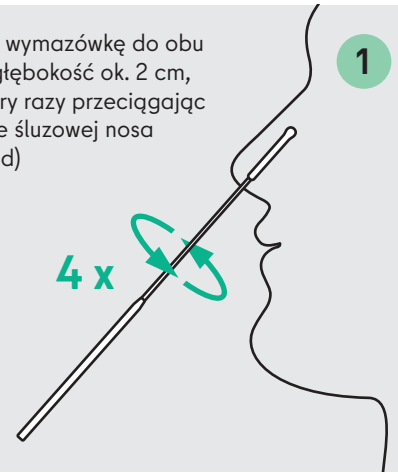

## Testowanie próbki

**2**

Wprowadzić wymazówkę i obrócić ją kilkanaście razy

Ścisnąć probówkę w kierunku wacika, aby uwolnić antygen

**3**

więcej niż 10 x

Wymazówkę należy wprowadzić na głębokość ok. 2 cm do każdego otworu nosowego.

**4**

Zaaplikować cztery krople do zagłębienia na kasecie testowej

**5**

Odczyt po 15 minutach wyniku

Po czasie dłuższym niż 30 minut wynik nie nadaje się do oceny!

## Ocena wyników

Każdy kolorowy odcień na linii testowej (T) należy uznać za wynik dodatni

**Ujemny**  
Kolorowa linia kontrolna (C)

**Dodatni**  
Kolorowa linia kontrolna (C) i linia testowa (T)

**Nieprawidłowy / niejasny**  
Brak linii kontrolnej (C)

## Utylizacja

Zużyte zestawy testowe należy wyrzucić zaizolowane do odpadów domowych

Uczniowie oraz pracownicy szkół i przedszkoli mogą pójść do szkoły / przedszkola

- Rodzice zgłaszają chorobę dziecka w szkole, pracownicy szkół lub przedszkoli zgłaszają zachorowanie w swoim miejscu pracy
- Uczniowie i pracownicy szkół lub przedszkoli wykonują powtórny test PCR w jednym z centralnych ośrodków testowych

Powtórzyć test z nowym materiałem